


# Důležité informace - uchovejte pro budoucí použití!

CZ

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Tento výrobek není určen k lékařskému použití v nemocnicích. Pouze k domácímu použití!
- Aby při používání podušky nedošlo k úrazům elektrickým proudem, dodržujte prosím následující:
  - Nepoužívat vlhké. Pokud poduška navlhne nebo se namočí, před použitím ji zcela vysušte.
  - Používat pouze v suchých místnostech, nikoliv v koupelně apod.!
  - Před každým použitím zkontrolujte, není-li poduška poškozená, tj. nepoužívejte ji v případě viditelného poškození ručního ovládání, přepínačů, zátky nebo elektrické vyhřívané podušky samotné.
  - Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
- Aby nedošlo k přehřátí:
  - Neponechávejte podušku zapnutou bez dozoru; pokud opouštíte místnost, vypněte ji.
  - Nepoužívejte podušku ve složeném stavu.
  - Dbejte, ať se netvoří přehyby.
  - Nezakrývejte ruční ovládání. Pro zajištění správné funkce ručního ovládání, ruční ovládání nepokládejte na nebo pod pružnou část spotřebiče, nevklaďte pod pošťáče, peřiny ani oděvy.
  - Kabel neomotávejte kolem ručního ovládání.
- Nepoužívat u osob neschopných pohybu, malých dětí, osob necitlivých na teplo ani u zvířat.
- Nadměrné používání při vysokých teplotách může způsobit popáleniny.
- Pokud má být přístroj používán po delší dobu, např. u usínacího uživatele, ovládání by mělo být nastaveno na doporučený režim pro nepřetržité použití.
- Nepoužívat u malých dětí. Nedovolte dětem hrát si s elektrickou poduškou. Neponechávejte děti s elektrickou poduškou bez dozoru, neboť nedokáží správně rozpoznat a vyhodnotit možné nebezpečí.
- Dečku často kontrolujte, není-li poškozená nebo opotřebovaná. Vykazuje-li jakékoli znaky opotřebení nebo poškození, nebo byl-li výrobek nesprávně použit, před jakýmkoli dalším použitím kontaktujte výrobce nebo autorizovaného zástupce (viz níže).
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí se vyměnit za kabel dodaný výrobcem, autorizovaným zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí úrazu.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo sami opravit. Pro zpětnou montáž je zapotřebí speciální nářadí.
- Pokud podušku nepoužíváte, nechte ji před složením vychladnout. Elektrickou podušku skladujte vypuštěnou na suchém místě. Nepokládejte na ni těžké předměty a nikdy ji neskladujte s ostrými přehyby. Jinak by mohlo dojít k poškození podušky.

## 1. Jak používat elektrickou podušku Microlife

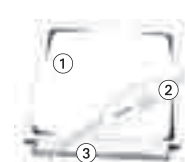

- ① Potah z měkké tkaniny – snímatelný a vypratelný. Patentní uzávěr.
- ② Ruční ovládání s posuvníkem pro nastavení tepla a ukazatel zapnutí.
- ③ Poduška



**UPOZORNĚNÍ:** Elektrickou podušku nikdy neužívejte bez potahu. Během používání zajistěte mezi elektrickou poduškou a pokožkou příměřenou cirkulaci vzduchu.

1. Potah ① položte na rovný povrch. Rozepněte patentní uzávěr.
2. Podušku ③ zcela vložte do potahu a postupně upravte obě strany. Kabel a ruční ovládání ② ponechte mimo potah.
3. Poduška se rozloží a vyplní celý potah. Zapněte patentní uzávěr.
4. Zastrčte do zásuvky 230-240 V stříd. napětí a pomocí posuvníku ručního ovládání zvolte požadované teplotní nastavení.
  - Na posuvníku zvolte teplotní nastavení – tím se poduška zapne. Rozsvítí se kontrolka signalizující připojení spotřebiče k napájení a jeho zapnutí.
  - Pro nepřetržité použití se doporučuje nastavení 1.
  - Elektrická vyhřívaná poduška se vypíná přesunutím posuvníku do polohy «0», načež kontrolka zhasne.
5. Ruční ovládání elektrické vyhřívané podušky automaticky vypne topné těleso za přibližně 90 minut. Kontrolka však zůstane svítit. Pro vyresetování časovače a spuštění dalšího vyhřívání posuvník přesuňte do polohy «0» a poté zpět do požadovaného teplotního nastavení.
6. Po skončení vypněte.

## 2. Pokyny k čištění



**UPOZORNĚNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv čištění výrobku napájecí kabel vždy odpojte od zdroje napětí.

1. Po sejmutí z podušky lze snímatelný potah vyprat dle pokynů uvedených na potahu.
2. Manžeta se nesmí mýt ani chemicky čistit!
3. Dbejte, aby ruční ovládání nenavlhlo. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, mohla by výrobek poškodit.
4. Ruční ovládání v žádném případě nenamáčejte. V opačném případě se do ručního ovládání může dostat vlhkost a způsobit škody.
5. Před opětovným zapnutím zkontrolujte stav ručního ovládání, důkladně vysušte podušku a její látkový potah.

## 3. Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka v délce **2 let** od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na elektronické ruční ovládání, kabel a podušku samotnou. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, nehody nebo poškození v důsledku nedodržování pokynů či úprav výrobku neprovedených výrobcem.

**Záruka je platná pouze po předložení záručního listu vyplněného dealerem.**

## 4. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

Podrobné uživatelské informace o našich výrobcích a službách lze nalézt na [www.microlife.com](http://www.microlife.com).