


LANAFORM®

Foot Massager

Massager

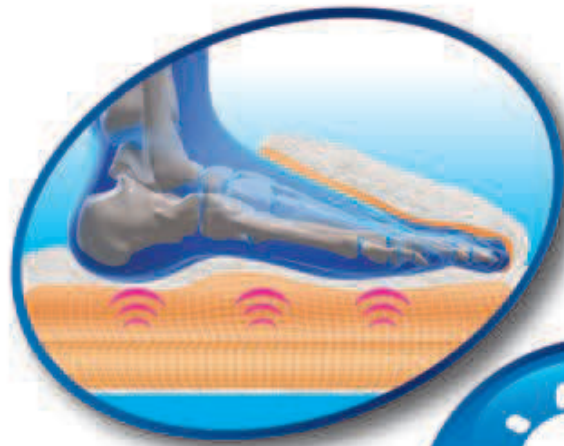

Eases feet

Soulage les pieds

Verlicht de voeten

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení zařízení FOOT MASSAGER od společnosti LANAFORM®. Zařízení FOOT MASSAGER poskytne odpočinek vašim nohám pomocí jemných vibrací.

JEŠTĚ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVÉHO NOVÉHO ZAŘÍZENÍ „FOOT MASSAGER“ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VĚŠKERÉ POKYNY, ZEJMÉNA PAK TĚCHTO NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH RAD:

- Příklad použijte výhradně pro účely uvedené v tomto návodu k použití a dle pokynů v něm.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Používejte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučené společností LANAFORM.
- Zařízení zásadně nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde je nakládáno s kyslíkem.
- V žádném případě nezakrývejte ventilační otvory, a stejně tak zařízení nikdy nepokládejte na nestabilní plochy, jako např. koberec, matrace. Mohlo by dojít k narušení ventilace. Zkontrolujte, zda nejsou otvory ventilace zanesené vlasy, chlupy, plstnatými smotky, prachem apod. Do otvorů nezasunujte žádné předměty.
- Nepoužívejte toto zařízení před spaním. Masáž má stimulační účinky, které mohou potřebovat spánek.
- Toto masážní zařízení zásadně nepoužívejte během spánku.
- Zařízení Foot Massager neumísťte do blízkosti radiátorů či jiných zdrojů tepla.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte pro masírování části těla, která je oteklá, zanícená či zasažená kožní vyrážkou.
- Nedopustte, aby na zařízení upadl jakýkoliv předmět, a stejně tak aby žádné předměty (připínáčky či jiné kovové předměty) nebyly do něj vkládány či zapichovány.
- Jestliže zařízení Foot Massager nefunguje, nechejte ho zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Tento výrobek je masážní přístroj pro neprofesionální využití a je určený pro zmírnění svalové únavy. Tento přístroj nepoužívejte jako náhradu lékařské péče. Přístroj je určený výhradně pro domácí použití.

SOUČÁSTKY

1. Příhrádka na baterie



NÁVOD K POUŽITÍ

- BATERIE VLOŽTE DO PŘIHRÁDKY, KTERÁ SE NACHÁZÍ POD POSUVNÝM KRYTEM V ZADNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ FOOT MASSAGER.
- UMÍSTĚTE 2 BATERIE „LR20“ (NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY) DO PŘÍSLUŠNÉ PŘIHRÁDKY. VRAŤTE VIBRAČNÍ JEDNOTKU NA MÍSTO DO POLŠTÁŘKU, NA PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO, A ZAŘÍZENÍ UZAVŘETE.
- VLOŽTE NOŽKY DO HORNÍ ČÁSTI POLŠTÁŘE.
- PRO SPUŠTĚNÍ VIBRACÍ JE NUTNÉ VYVINOUT LEHKÝ TLAK SMĚREM KE SPODNÍ ČÁSTI POLŠTÁŘKU.

ÚDRŽBA

1. Před praním polštářku je nutné odebrat vibrační jednotku.
2. Vibrační jednotka se nesmí prát.
3. Polštářek perte při maximální teplotě 30°.
4. Polštářek sušte při maximální teplotě 30°.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 2x1,5 Voltů – LR 20

SLOŽENÍ VÝROBKU

35% akryl - 65% polyester

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



• Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

- V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou. Odstraňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci.

Pozor: použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti!!!

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.