


LANAFORM®

# Heating Blanket

Multi-use

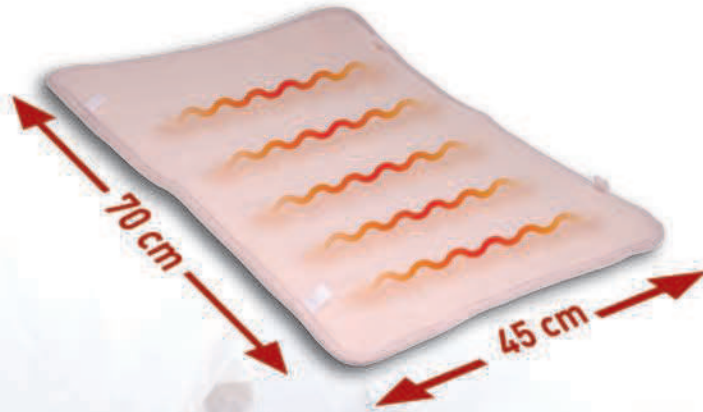

Constant heat

Chaleur constante

Constance warmte

# HEATING BLANKET MULTI-USE

## ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali elektrickou podložku „Heating Blanket Multi-Use“ od společnosti LANAFORM®.

Multifunkční elektrická podložka od společnosti LANAFORM® je vyrobena výhradně z prvotřídních materiálů. Je tvořena elektrickým okruhem, který je vybaven dvouvrstvou ochranou zaručující bezpečnost, zdravotní nezávadnost a pohodlí.

Každý výrobek je podroben přísnému testování a je v souladu s evropskými normami. Multifunkční elektrická podložka od společnosti LANAFORM® je vybavena odstupňovanou regulací teploty, která vám zajistí dokonalý pocit tepla jak v zimě, tak za vlhkého a deštivého počasí.

## **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM „HEATING BLANKET MULTI-USE“ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NIŽE UVEDENÉ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:**

Abyste předešli rizikům popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru či zranění:


- Použijte toto zařízení pouze k účelům, ke kterým je určeno.
- Tento přístroj není určený pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi (včetně dětí) a rovněž není určený pro osoby, které se neseznámily s tímto zařízením nebo nemají zkušenosti s jeho používáním. Výjimkou jsou případy, kdy tyto osoby byly poučeny o používání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost či nad nimi vykonává dohled. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Použijte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučené společností LANAFORM®.
- V případě, že je napájecí kabel poškozen, je třeba ho nahradit speciálním kabelem či kabelem podobným, který je k dostání u dodavatele či v rámci záručních služeb.
- Zařízení nesmí být použito v případě, je-li poškozen napájecí kabel, zařízení nefunguje správně, upadlo na zem nebo je poškozeno či spadlo do vody. Nechejte proto zařízení zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel a tento kabel nepoužívejte ani jako držadlo.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Zařízení, které spadlo do vody, okamžitě odpojte ze sítě, a to ještě před jeho vylovením z vody.
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Jestliže zařízení nepoužíváte, odpojte je.
- Tuto multifunkční elektrickou podložku používejte pouze s dodaným napájecím kabelem.
- Elektrický kabel nepřehýbejte, a rovněž tak nepoužívejte tuto multifunkční elektrickou podložku, je-li složená, srolovaná nebo přeložená.
- Tento přístroj nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde se podává nebo skladuje kyslík.
- Než odpojíte zařízení ze sítě, musíte nejprve přepnout hlavní spínač do polohy „0“, poté vytáhnout zástrčku ze sítě a odpojit kabel od podložky.
- Při používání této multifunkční elektrické podložky nepoužívejte zavírací špendlíky, neškrábejte ji ostrými předměty a nesnažte se ji vyprášit pomocí jiných předmětů. Zařízení nepřichytávejte pomocí špendlíků a ani jiných kovových předmětů. Nedovolte, aby na zařízení něco spadlo, a také nevkládejte do jeho otvorů žádné předměty.
- Tuto multifunkční elektrickou podložku nevystavujte slunečnímu záření a ani ji nežehlete. Vyhněte se tak poškození izolačních vrstev elektrického okruhu.
- Toto zařízení není určeno pro užívání v nemocničním prostředí, ale je vyhrazeno pouze pro domácí použití.
- Tuto multifunkční elektrickou podložku nepoužívejte s jinými topnými zařízeními a ani ji nepoužívejte pro ohřev jiných zařízení (ohřívačů, ohřívacích příkrývek...).
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto přístroje na svého ošetřujícího lékaře.

- Jestliže během používání zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Nepoužívejte tento přístroj pro oblast těla, která je nateklá, zraněná či zasažena kožní vyrážkou.
- Ovládání musí vždy zůstat na dosah ruky. Spínač neschovávejte pod tuto multifunkční elektrickou podložku, pošťár ani jiné předměty.
- Zařízení nepoužívejte, je-li mokré, a ani se ho nesnažte vysušit tím, že ho zapnete.
- V žádném případě nepokládejte tuto multifunkční elektrickou podložku na sebe. Lze ji používat pouze jako podložku.
- Nepoužívejte tuto podložku pro zvířata.
- Jestliže chcete multifunkční elektrickou podložku uložit na delší dobu, uskladněte ji na suchém místě. Před dalším použitím nejprve pečlivě zkontrolujte stav podložky. Zdá-li se, že je napájecí kabel poškozen, zařízení nepoužívejte.
- Toto zařízení nesmí být používáno malými dětmi a osobami bez citlivosti na teplo.

## POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ A MULTIFUNKČNÍ PODLOŽKY

### Schéma a popis:

- 1) Kontrolka ohřevu „ON“
- 2) Poloha „0“ (= Stop)
- 3) Poloha „1“ (= 1. intenzita)
- 4) Poloha „2“ (= 2. intenzita)

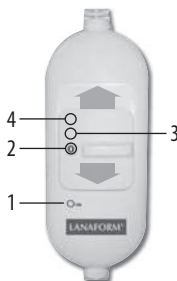

### Příklady různých možných použití multifunkční elektrické podložky:

#### 1) V POSTELI:

Umístěte multifunkční elektrickou podložku naplocho na požadované místo.

#### 2) Jako ohřevný PŘEHOZ SEDADLA:

Umístěte zařízení prostě tam, kam se chcete posadit, tj. na křeslo v kanceláři, na židli, na křeslo, na pohovku...

#### 3) Jako měkký, pohodlný a teplý PODKLAD:

Na základě různých testů je prokázáno, že tento přístroj je velmi bezpečný. Díky tomu lze poskytnout optimální komfort i kojencům a malým dětem.

**Upozornění:** - Používání tohoto zařízení musí probíhat pod dohledem odpovědné osoby.

- Rozhodně se nedoporučuje používat tuto podložku ve spánku.

### Nastavení teploty:

- Začněte připojením napájecího kabelu do zásuvky, která se nachází po straně podložky, a druhý konec připojte ke zdroji elektrického napájení (220 – 240 V stř.). Uvedte spínač do „polohy 2“, aby se tak multifunkční elektrická podložka rychleji nahřála na požadovanou teplotu. Než si na ni lehnete, nechejte podložku přibližně 30 minut v provozu (rozsvítí se kontrolka).
- Když si budete lehat, zvolte „polohu 1“, aby tak byla zaručena příjemná teplota.
- Než usnete, silně doporučujeme zařízení vypnout tak, že uvedete hlavní spínač zařízení do „polohy 0“ (kontrolka zhasne).



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Jestliže multifunkční elektrickou podložku nepoužíváte a jestliže se ji chystáte vyčistit, dodržujte následující pokyny:

- Ujistěte se, zda je spínač skutečně v „poloze 0“.
- Odpojte napájecí kabel ze sítě.
- Odpojte konektor, který spojuje ovládání se zařízením.
- Než přistoupíte k čištění, nechte zařízení vychladnout.

## ČIŠTĚNÍ

Drobné skvrny lze vyčistit pomocí vlhkého hadříku či houbičky, a případně pomocí tekutého pracího prostředku na jemné textilie.

Pozor, multifunkční elektrická podložka nesmí být čištěna chemicky, nesmí se ždímat, ani sušit v sušičce na prádlo, nesmí se mandlovat či žehlit.

Jestliže je multifunkční elektrická podložka velmi znečištěná, lze ji vyprat v pračce. Pračku nastavte na program pro jemné textilie na 30 °C. Použijte prací prostředek na jemné prádlo v dávkování podle pokynů výrobce.

Podložku však neperte příliš často, aby tak nedocházelo k přílišnému namáhání materiálu. Multifunkční elektrickou podložku nelze prát v pračce víc než 5krát za celou dobu její životnosti.

Při sušení podložky nepoužívejte prádlové količky ani podobné předměty.

Multifunkční elektrickou podložku nevystavujte zdrojům tepla jako jsou slunce, radiátory či jiné.

Napájecí kabel připojte k podložce teprve tehdy, až budou konektor spolu s celou podložkou zcela suché.

**V žádném případě nezapojte multifunkční elektrickou podložku za účelem jejího vysušení.**

## SKLADOVÁNÍ

Jestliže nebudete podložku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v původním obalu na suchém místě tak, aby na ní neležel žádný další předmět.

## RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.