

LANAFORM®

Heating Blanket

For Back



Constant heat

Chaleur constante

Constante warmte

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali vyhřívanou vestu „Heating Blanket for Back“ značky LANAFORM®.

Vyhřívaná vesta „Heating Blanket S1“ značky LANAFORM® podléhá přísným testům, které splňují platné evropské normy. Vesta navíc nabízí postupné nastavení teploty, abyste ho mohli využívat i jindy než pro zahřátí v zimě nebo ve vlhkém počasí.

NEŽ ZAČNETE VÝROBEK „HEATING BLANKET FOR BACK“, POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Dodržováním následujících pokynů zabráníte vzniku popálenin, požáru či úrazům elektrickým proudem nebo jiným zraněním:


- Používejte tento přístroj výhradně v souladu s návodem k použití popsáním v této příručce.
- Přístroj není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto přístroje. Je vhodné zajistit, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM® nebo není dodáno společně s tímto zařízením.
- V případě poškození je nutné elektrický kabel nahradit speciálním kabelem nebo obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.
- Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, že nefunguje správně, spadlo na zem či do vody nebo je poškozeno. V takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Při přenášení nedržte zařízení za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.
- Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a teprve poté jej zvedněte.
- Žádný elektrický přístroj nesmí zůstat zapojený bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- Elektrický vyhřívanou vestu používejte pouze s dodávanou elektrickou zástrčkou.
- Elektrický kabel nepřehýbejte a vyhřívanou vestu nepoužívejte, pokud je složená, svinutá nebo přehnutá.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo do kterých je přiváděn kyslík.
- Chcete-li zařízení odpojit, otočte knoflíkem do polohy OFF (Vypnuto) a pak vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zavírací špendlíky a nepoškozujte vyhřívanou vestu ostrými ani tupými předměty. Nesnažte se vestu připevnit pomocí špendlíků či jiných kovových předmětů. Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte.
- Nevystavujte vyhřívanou vestu slunečnímu světlu a nežehlete ji. Mohlo by dojít k poškození izolace elektrického obvodu.
- Vyhřívaná vesta není určena k použití v nemocničním prostředí, ale jen pro domácí použití.
- Nepoužívejte vyhřívanou vestu společně s jinými vyhřívanými zařízeními ani k zahřívání jiných předmětů (ohřívací láhev, ohřívací příkrývka, ...).
- Máte-li obavy o své zdraví, před použitím tohoto přístroje se poraďte s lékařem.
- Pokud při používání tohoto přístroje cítíte jakoukoli bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zraněnou nebo na ní máte vyrážku.
- Ovladač musíte mít stále na dosah ruky – neschovávejte je pod polštář ani jiný předmět.
- Neperte vyhřívanou vestu příliš často, abyste ji nadměrně nenamáhali. Vyhřívanou vestu neperte v pračce více než pětkrát za celou dobu její životnosti.
- Je-li přístroj vlhký, nepoužívejte ho a ani jej nezapínejte, aby uschl.
- Pokud nebudete elektrický vyhřívanou vestu delší dobu používat, uložte ji na suché místo. Než zařízení po delší době poprvé zapnete, pečlivě zkontrolujte jeho stav. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození, vestu nezapínejte a obraťte se na dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.
- Tento přístroj nesmí používat velmi malé děti, osoby necitlivé vůči teplu a nesmí se používat pro zvířata.

- Zařízení se nesmí používat na skládací posteli nebo na posteli, jehož jednu část lze polohovat.
- Přístroj často prohlížejte a kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození nebo opotřebení, vestu nezapínejte a obraťte se na dodavatele nebo na jeho oddělení prodejných služeb.

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ VESTY


Nákres a popis:

- 1) Vypínač OFF
- 2) Poloha „1“ (1. stupeň intenzity)
- 3) Poloha „2“ (2. stupeň intenzity)
- 4) Poloha „3“ (3. stupeň intenzity)
- 5) Displej

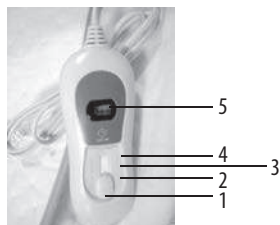

Fungování vyhřívání vesty:

- Vyhřívanou vestu si umístíte na záda pomocí upínacího popruhu a suchého zipu. Světla strana vesty musí směřovat k zádkám.
- Kabel zasuňte do zásuvky umístěné na boku vyhřívání vesty a druhý konec do zásuvky elektrické sítě (AC220-240V). Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází v blízkosti prostěradla a zda kabel není v poloze, kvůli které by o něj mohl uživatel zakopnout.
- Pro předehřátí vesty nastavte regulátor do polohy 3 a nechte prostěradlo při tomto režimu zahřát po dobu 15 minut. Teplota se zvyšuje postupně.
- Po předehřátí nastavte ovladač regulátoru do režimu vyhřívání, který vám vyhovuje.
- Přístroj vypnete nastavením tlačítka do polohy „OFF“.

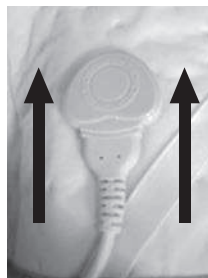

Poznámka: Vyhřívání vesty se může bez přerušování používat 90 minut. Pokud ho chcete používat delší dobu, doporučujeme nejprve nechat vyhřívanou vestu po dobu 5 minut vychladnout a teprve poté ji znovu zapnout.

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud vyhřívanou vestu nepoužíváte nebo pokud ji chcete očistit, dodržujte následující pokyny:

- Přepněte ovládání do polohy OFF (Vypnuto).
- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Odpojte konektor propojující ovladač a přístroj.
- Než začnete vestu čistit, nechte ji vychladnout

ČIŠTĚNÍ

Ménší skvrny lze očistit pomocí navlhčeného hadříku nebo houbičky. Lze použít i malé množství čistícího přípravku na jemné textilie.

Upozornění: Vyhřívanou vestu nečistěte chemicky, neždímejte, nesušte v sušičce, neležte ani nemandlujte.

V případě silného znečištění lze vyhřívanou vestu vyprat v pračce. Na pračce zvolte program určený pro praní jemných textilií při teplotě 30 °C. Použijte prací prostředek na jemné textilie, který dávávkujte podle pokynů výrobce.

Neperte vyhřívanou vestu příliš často, abyste ji nadměrně nenamáhali. Vyhřívanou vestu neperte v pračce více než pětkrát za celou dobu její životnosti.

Při sušení nezavěšujte vestu pomocí kolíčků na prádlo či podobných předmětů.

Vyhřívanou vestu nevystavujte zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, radiátor atd.

Přívodní kabel připojte k vestě až po úplném uschnutí vesty i konektoru.

> V žádném případě se nesnažte vyhřívanou vestu vysušit tím, že ji zapnete.

Skladování

Pokud nebudete vyhřívanou vestu delší dobu používat, doporučuje se ji uložit v původním balení na suché místo a nepokládat na ni žádné předměty.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.

SA LANAFORM NV

**Zoning de Cornémont
rue de la Légende. 55
B-4141 LOUVEIGNE
BELGIUM**

Tél. +32 (0)4 360 92 91

Fax +32 (0)4 360 97 23

info@lanaform.com

www.lanaform.com